

BEZPIECZNA LINIA NACZYJNIOWA

EXADROP® - APARAT DO KONTROLOWANEJ INFUZJI W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM



Filtr odpowietrzania w odpowietrzniku aparatu tworzy system zamknięty w rozumieniu definicji NIOSH co jest poświadczone badaniem. Filtr powietrza w odpowietrzniku posiada wydajność filtra bakteryjnego (BFE) wynoszącą min. 99,999941 % oraz wydajność filtra wirusowego (VFE) wynoszącą min. 99,99964%. Procedura badawcza BFE zgodna ze specyfikacją 36594C, ASTM F2101 oraz ASTM 2100. Laboratorium badawcze akredytowane zgodnie z ISO EC 17025.



Nazwa firmy na komorze kropłowej umożliwiającą identyfikację producenta w przypadku incydentu medycznego i reklamacji.



Dwu częściowa komora kropłowa o zróżnicowanej, segmentowanej funkcjonalności optycznej (wysoka przezroczystość w segmencie górnym) i manualnej (elastyczność w segmencie dolnym).



Dren zaopatrzony w zawór zwrotny przeciwdziałającą cofaniu się krwi do aparatu.



Dren zaopatrzony w zawór bezigłowy do podania leku . Dezynfekcja zaworu metodą przecierania (zgodnie z zaleceniami PSPE zeszyt VIII)




Dren bez PCV

BEZPIECZNA LINIA NACZYNIOWA

EXADROP® - APARAT DO KONTROLOWANEJ INFUZJI W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM

Exadrop® pozwala:

- osiągnąć stały poziom przepływu
- uregulować kinetykę podaży leku
- podać wymaganą ilość leku w konkretnym czasie

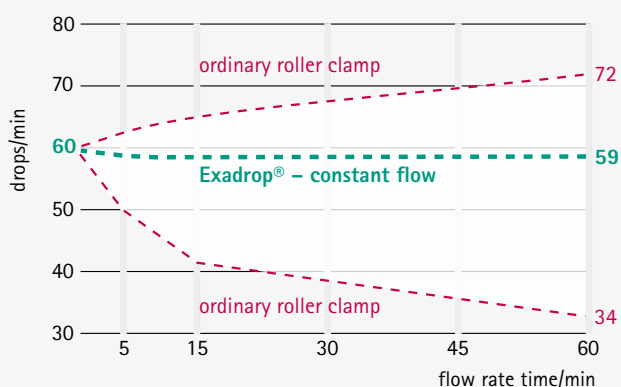

Ważna informacja:

Nie należy podawać krwi, preparatów osocza oraz płynów o wysokiej lepkości poprzez regulator przepływu Exadrop®!

Exadrop®

Filtr odpowietrzania stosowany w aparacie Exadrop może być określony jako system zamknięty w odniesieniu do definicji NIOSH 2004.

Nazwa produktu	odpowietznik	wolne od PVC	zawór BCV	port iniekcyjny	długość drenu (cm)	Numer
Exadrop® z Intrafix® Primeline	■				150	406 1209
Exadrop® z Intrafix® Primeline	■			■	150	406 1276
Exadrop® z Intrafix® Primeline	■				180	406 1284
Exadrop® z Intrafix® Primeline	■				210	406 1225
Exadrop® z Intrafix® Primeline Neutrapur®	■	■			150	406 2264
Exadrop® Inline					54	406 1306
Exadrop® z Intrafix® Primeline i Infuvalve® B.C.V.*	■		■		180	418 0330

Ilość w opakowaniu.: 50 szt.

AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl,
tel. (61) 44 20 100 | fax (61) 44 23 936 | www.chifa.com.pl

AESCULAP CHIFA - firma grupy B. Braun

HC-BLN-043